




**COVIDIEN**

*positive results for life™*

**Surgipro™**

**Monofilament Polypropylene suture**

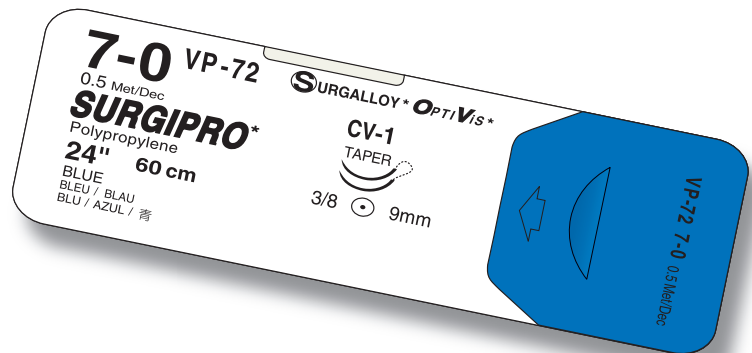


■ ポリエチレン・コーティングを施し、組織通過抵抗がより少なくなりました。  
また、ノットの送り込みも、さらにスムーズになりました。


■ 適度な伸展性があるので、安定した結節ができます。

■ 不活性であるため、生体内での劣化が極めて少なく、長期にわたる創部の保持を可能にします。

■ 針には、心臓血管外科用に新たに開発したステンレス合金 (サージャロイ™) を採用。切れ味と強度を向上しました。  
そのため、硬化した組織への刺通もスムーズに行えます。

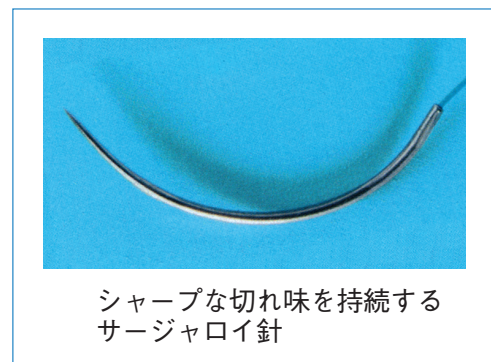


■ Dr.のニーズにより、  
フラット・ニードルも選択できます。

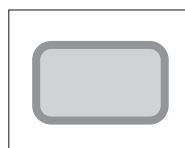

フラット・ニードル タイプ

◀ 針を保持する際の  
安定性が増す。

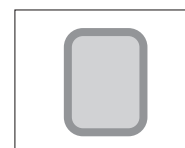

レギュラー タイプ

■ 形成外科用には、より切れ味を増したコスメティック リバーズ カutting針を装着しました。

■ 眼科用には強度と切れ味を高めたプレミアムポイントヘラ型針付をご用意しました。

## 使用上の注意

1. 本品はディスポーザブル製品であるので、開封後の再使用はしないこと。
2. 再滅菌しないこと。
3. 過度の力がかかるような緊張した組織の収束には用いないこと。
4. 整形外科分野にて使用する場合は、症状によって医師の判断により、外部の固定をすること。
5. 感染創の縫合及び排液法などを適用する場合は、適切な外科的処置を行うこと。
6. 使用期限はパッケージの ☒ マークに表示されています。

## 結節の方法

合成糸の標準結節法を適用して下さい。  
必要に応じてさらに結び目を加えて下さい。



ご使用に際しては、  
添付文書を必ず  
お読み下さい。



再使用はできません。



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。  
許可なく本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び  
"positive results for life"はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
© 2010 Covidien

販売名：サージプロ  
医療機器承認番号：20500BZY00339000

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

サージカルデバイス事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

東日本 TEL：0120-58-2294

西日本 TEL：0120-54-2356

FAX：03-5717-1249