

# オプチレイ<sup>®</sup> 320注シリンジ 40mLのご使用にあたって


## ■ご使用前のお願い(本剤は造影剤注入装置には適合しません)

- プラスチックトレーからシリンジを取り出し、シリンジの破損、チップキャップ部とラバーピストン部から薬液の漏れ等がないことを確認して下さい。異常が認められた場合には、本品を使用しないで下さい。
- チップキャップは、注射針等をセットする直前まで、外さないで下さい。
- 電子レンジ、湿式ならびに温水中での加温は避けて下さい。

## ■組み立て方


- プッシュロッドを取り出し、時計回りに回転させながら、ラバーピストンにまっすぐに装着して下さい。

注) プッシュロッドをラバーピストンと共に回転させて下さい。この時、プッシュロッドを傾けて、ラバーピストンがねじれたり、傾いたりしないように注意して下さい。

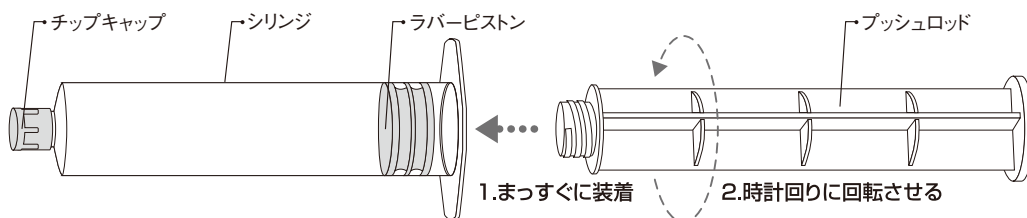

## ■注射針等のセット方法

- シリンジのチップキャップを上向きにして矢印方向に静かにゆっくり取り外して下さい(a)。薬液が飛び出す可能性がありますので注意して下さい。
- 注射針等をセットして下さい(b)。注射針等のセットは、軽く抵抗を感じた時点でねじ込みを止めて下さい。必要以上にねじ込みを行う必要はありません。
- シリンジ先端部に破損・ヒビ等がないことを確認の上、使用して下さい。

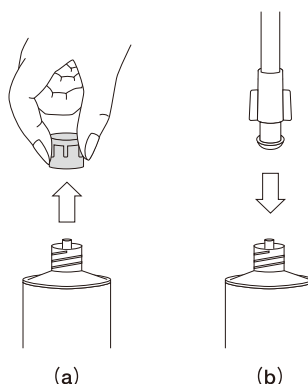

## ■投与後のお願い

- 使い残した薬液は廃棄して下さい。
- シリンジは再使用しないで下さい。