

仕様

ディスポーザブルペンシル				
	E2515シリーズ E2350H	E2516シリーズ E2450H	E2504シリーズ E2250H	E2517
作動方法	ハンドスイッチ (ロッカー式)	フットスイッチ (ボタン式)	フットスイッチ	ハンドスイッチ
コード	3端子コネクタ-3m又は4.6m	3端子コネクタ-3m	1端子コネクタ-3m	3端子コネクタ-3m

オーダーインフォメーション

滅菌済、ディスポーザブル ハンドスイッチ式ペンシル

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
E2515	ディスポーザブル ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル コード長 3m	25本/箱	II
E2515H	ディスポーザブル ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II
E2515HB	ディスポーザブル ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 4.6m	25本/箱	II
E2515DA	ディスポーザブル ニードル電極付ロッカースイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II
E2516	ディスポーザブル ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル コード長 3m	25本/箱	II
E2516H	ディスポーザブル ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II
E2516HD	ディスポーザブル ニードル電極付ボタンスイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II

滅菌済、ディスポーザブル フットスイッチ式ペンシル

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
E2504	ディスポーザブル ブレード電極付ペンシル コード長 3m	25本/箱	II
E2504H	ディスポーザブルThe Edge 電極付ボタンスイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II

滅菌済、The Edge コーティングブレード付 ディスポーザブル ハンドスイッチ式ペンシル

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
E2350H	ディスポーザブルThe Edge 電極付ロッカースイッチ式ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II
E2450H	ディスポーザブル ブレード電極付ペンシル ホルスター付き コード長3m	25本/箱	II

滅菌済、The Edge コーティングブレード付 ディスポーザブル フットスイッチ式ペンシル

カタログ番号	内容	発注単位	クラス
E2250H	ディスポーザブルThe Edge 電極付ペンシル ホルスター付 コード長 3m	25本/箱	II

※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承ください。



COVIDIEN、コヴィディエン、COVIDIENロゴマーク及び "positive results for life" はCovidien AGの商標です。
©2011 Covidien.

販売名：電気メス用付属品 (滅菌) 医療機器承認番号：208008ZG00060000
販売名：電気メス用電極 (滅菌) 医療機器承認番号：209008ZG00030000

製造販売元
コヴィディエン ジャパン株式会社

エナジーデバイス事業部

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-ea-penc (04)
1105.4000.cr.y



電気手術器用 ディスポーザブルペンシル

高い性能・品質

ステンレス製ブレード付、コーティングブレード付も、コヴィディエンのペンシルは安定した切開・凝固性能を発揮します。

人間工学に基づいたデザイン

ペンシルの感触と安定感が、労力を要する手術時の術者のストレスや緊張感を和らげます。

安全性

シールドされたスイッチ機構とメス先の回転防止用六角軸によって、術者と患者双方の安全性を追求しています。

使いやすさ

押しやすいデザインのスイッチは感触を安定して指に伝えます。

すべてのペンシルにはブレード又はニードル電極が付いています。また、電極差込部直径が2.4mmの標準型シャフトの電極が装着可能で、幅広い手術に対応いたします。



豊富なバリエーション
焦げ付かず、より扱いやすく。

ディスポーザブル ペンシル

ハンドスイッチ式ペンシル

E2515 / E2515H / E2516 / E2516H

確かな手応えを把握できるように設計されたスイッチにはプッシュボタン式 (E2516) とロッカースイッチ式 (E2515) 2種類があり、好みに合わせた選択ができるようになっています。また、ホルスター付のタイプもご用意しています。(E2515H、E2516H)


フットスイッチ式ペンシル

E2504 / E2504H

ペンシル用アクセサリ レクトロブレイシブ・ メス先電極クリーナー

E2401

素早く簡単にメス先電極から焼痂を取り除きます。

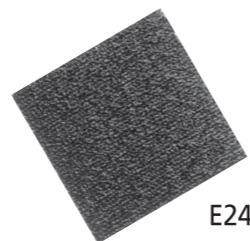

E2401

The Edge コーティングブレード付 ディスポーザブル ペンシル

ハンドスイッチ式ペンシル

E2350H / E2450H

- 自社開発したコーティング技術により、メス先の汚れを擦り落とす手間がなく、スポンジや濡れガーゼで簡単に拭き取れる為、手術時間の短縮が可能です。
- 独創的なデザインによりステンレス製のメス先と同等またはより高い切開性能を兼ね備えています。

The Edge電極の主な特長

- 電極表面のコーティングにより焼焦げの付着を減らし、ペンシルの操作性を高めます。
- 高周波エネルギーをエッジ部分に集中できるため、より効果的な切開、凝固ができます。
- より低い出力設定で、ステンレス製のメス先電極と同等又はより高い臨床効果が得られます。
- より低い出力設定で使用できる為、患者の安全性を高めます。
- 再出血の原因となるメス先の組織への付着を減らし、凝固の効果を高めます。
- ひび割れしにくく、またはがれ落ちにくいコーティングを施しています。

ペンシル用アクセサリ ディスポーザブルホルスター

E2400


手術中の不意の事故から患者、手術スタッフを守ります。



E2515

E2504

E2516

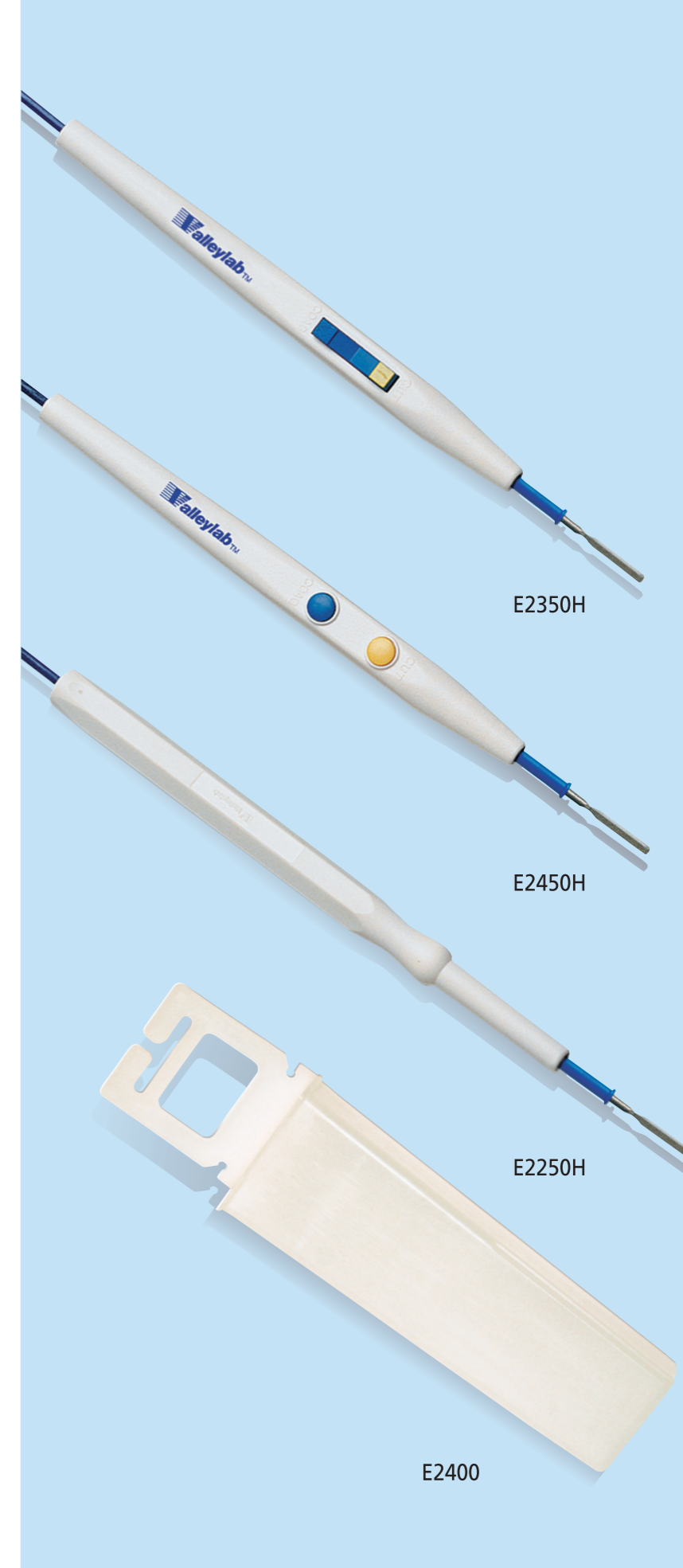

E2350H

E2450H

E2250H

E2400