



COVIDIEN

positive results for life™

電気メス用付属品（滅菌） 腹腔鏡下外科手術用Opti4™電極・ハンドセット

特 徴


吸引用ホール及び新しい絶縁型電極チップの採用により、副損傷のリスクを減らし、かつ吸引力が増加しました。これにより正確な剥離操作が要求される腹腔鏡下手術をサポートします。

豊富なオプション

電極は固定式タイプか引込型、またハンドセットはピストル型またはペンシルグリップ型から選択できます。チップのデザインも数多く用意されています。オプティ4™電極により、簡便に外科医のニーズが満たされます。

ハイパフォーマンス

この1本で、吸引・洗浄・切開・凝固が行えます。シャフトは360度回転し、引込型電極の使用も可能です。また、多機能を備えたオプティ4™は、必要とされる器具の本数を減らし、大変効率的です。

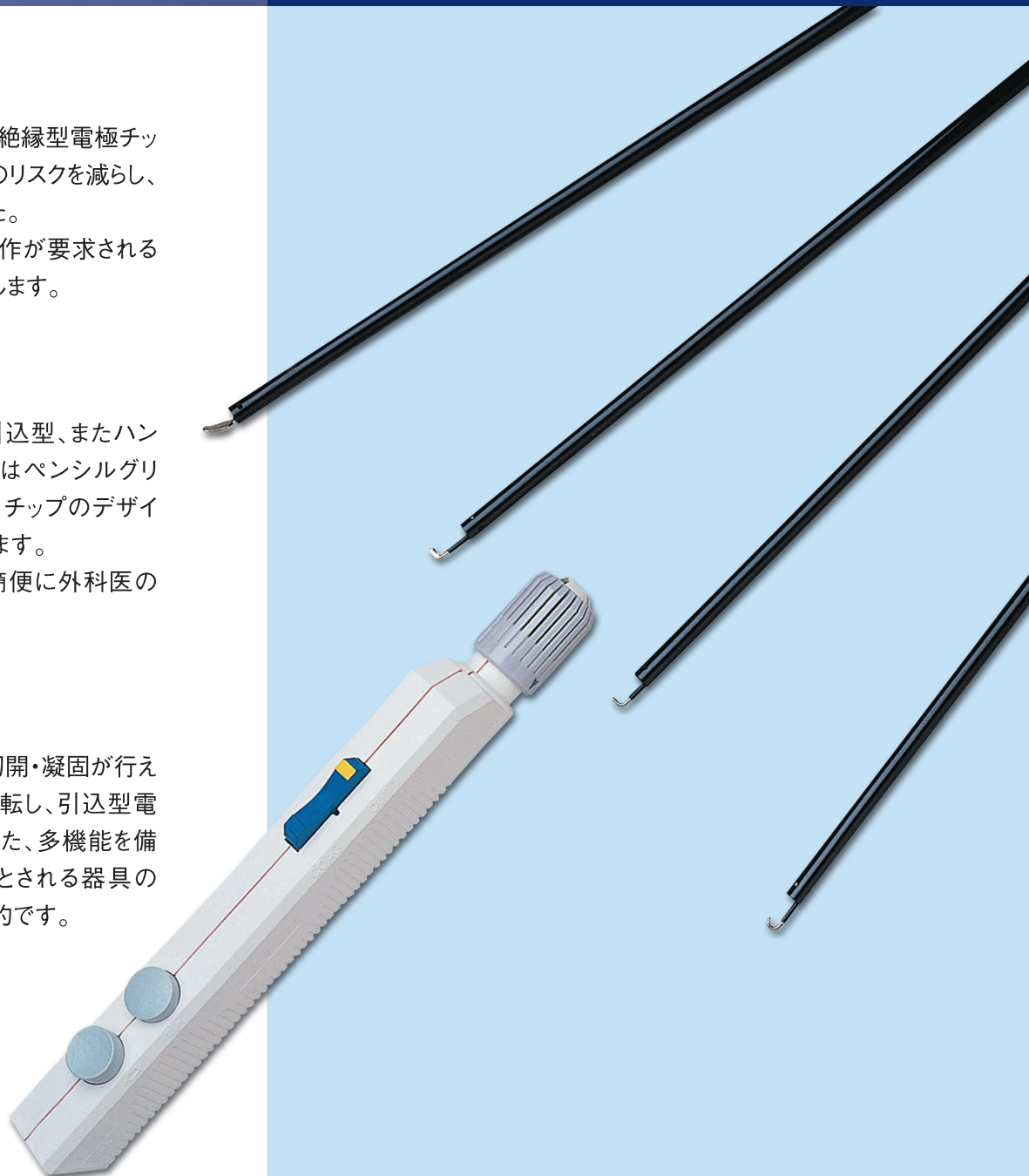



E2781RS*



E2782RS*



E2783RS*



E283RP*



E2784RS*



E2780-28



E2786-28

*印がついた電極には、引込型と固定型(非引込型)の2種類があります。

仕 様

オプティ4™ディスプレイザブル腹腔鏡外科手術用ハンドセット

ハンドセットの形状：ペンシルグリップ/ピストルグリップ

吸引・洗浄の操作：ボタン式スイッチ

切開・凝固の操作：ロッカー式スイッチ(ペンシルグリップ)/ボタン式スイッチ(ピストルグリップ)

吸引管の形状：4.7mmバルブコネクター

洗浄管の形状：雌型ロック式ルアーコネクター

コ ー ド：3m、電気メス装置に直接接続可能な3ピンプラグ付

互 換 性：全てのコヴィディエンの電気メス装置、及びE2781R～E2784Rシリーズの引込型メス先電極やE2780シリーズの非引込型メス先電極に接続可能

オプティ4™ディスプレイザブル腹腔鏡外科手術用メス先電極

長 さ：28cm及び36cm

外 径：4.8mm

絶 縁 体：ポリオレフィン(E2780シリーズ)

ポリカーボネート及びPTFE(E2781R～E2784Rシリーズ)

互 換 性：コヴィディエンE2750

オーダーインフォメーション

滅菌済、腹腔鏡下外科手術用ハンドセット

カタログ番号	内容	発注単位
E2750	ペンシルグリップ ハンドセット	1本

滅菌済、腹腔鏡下外科手術用非引込型メス先電極

カタログ番号	内容	発注単位
E2780-28	ストレートスパチュラチップ電極 28 cm	1本
E2781-28	カーブスパチュラチップ電極 28 cm	1本
E2782-28	ワイヤーJ字フックチップ電極 28 cm	1本
E2783-28	ワイヤーL字フックチップ電極 28 cm	1本
E2784-28	フラットL字フックチップ電極 28 cm	1本
E2786-28	シリンジ(円筒型)チップ電極 28 cm	1本

滅菌済、腹腔鏡下外科手術用非引込型メス先電極、アスピレーションホール付

カタログ番号	内容	発注単位
E2781RS	カーブスパチュラチップ電極 28 cm	1本
E2782RS	ワイヤーJ字フックチップ電極 28 cm	1本
E2783RS	ワイヤーL字フックチップ電極 28 cm	1本
E2783RP	ワイヤーL字フックチップ電極 36 cm	1本
E2784RS	フラットL字フックチップ電極 28 cm	1本

※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。

COVIDIEN、コヴィディエン、COVIDIENロゴマーク及び "positive results for life"はCovidien AGの商標です。
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
©2010 Covidien.

販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
クラス：Ⅱ



製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社

EbD事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-ea-opt4(04)
1008.2000.cr.y