



COVIDIEN

positive results for life™

電気メス用付属品（滅菌） Suction Coagulators

同時に出来る2つの機能

吸引と繊細な凝固が同時に行えます。

フレキシブルな電極

コアギュレーションサクションチューブを曲げることが出来るため先端の角度を変えて使用できます。


フットスイッチ又はハンドスイッチ

出力はフットスイッチ式とハンドスイッチ式があります。吸引のコントロールは手元で可能です。

使いやすさ

押しやすいデザインのスイッチにより感触を指に伝えます。

また電極は長さが2種類、内径が3種類あり幅広く対応いたします。

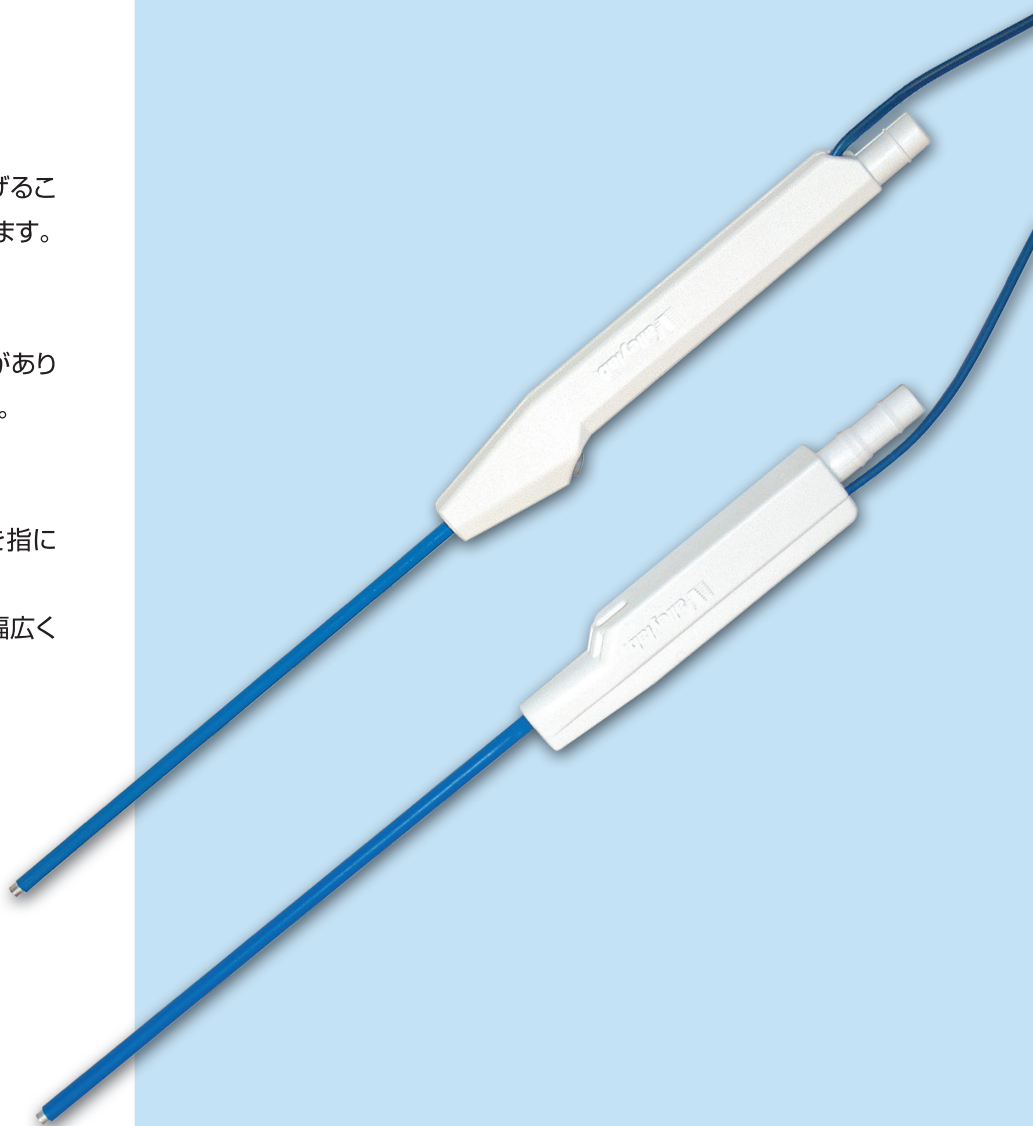

仕 様

作動方法

フットスイッチ式とハンドスイッチ式

吸引のコントロール

サクシヨンポートを指で覆うと吸引できます。

安全性

コアギュレーターハンドピースは術者の指を電撃から保護する構造です。

電極チューブ部分も絶縁されています。

接続できる吸引チューブ

直径9.5mmの吸引チューブ

コードフットスイッチ式

コード末端のプラグにコヴィディエン製E0502シリーズ又はE00017アダプターを使用して電気手術器本体に接続

コードハンドスイッチ式

コード末端の3端子プラグを電気手術器本体に接続

オーダーインフォメーション

カタログ番号	作動方法	全長	内径	発注単位	クラス
E250510	フットスイッチ式	15.24cm	3.33mm	25本 / 箱	II
E26086	ハンドスイッチ式	15.24cm	2.67mm	25本 / 箱	II
E26106	ハンドスイッチ式	15.24cm	3.33mm	25本 / 箱	II
E26126	ハンドスイッチ式	15.24cm	4.0mm	25本 / 箱	II
E261016	ハンドスイッチ式	40.64cm	3.33mm	10本 / 箱	II

※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。



COVIDIEN、コヴィディエン、COVIDIENロゴマーク及び "positive results for life" はCovidien AGの商標です。
©2010 Covidien.

販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000

製造販売元

コヴィディエン ジャパン株式会社
EbD事業部

本 社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号
PHONE (03) 5717-2330 FAX (03) 5717-2331

ct-eb-ea-suct (02)
1005.pdf.cr.y