
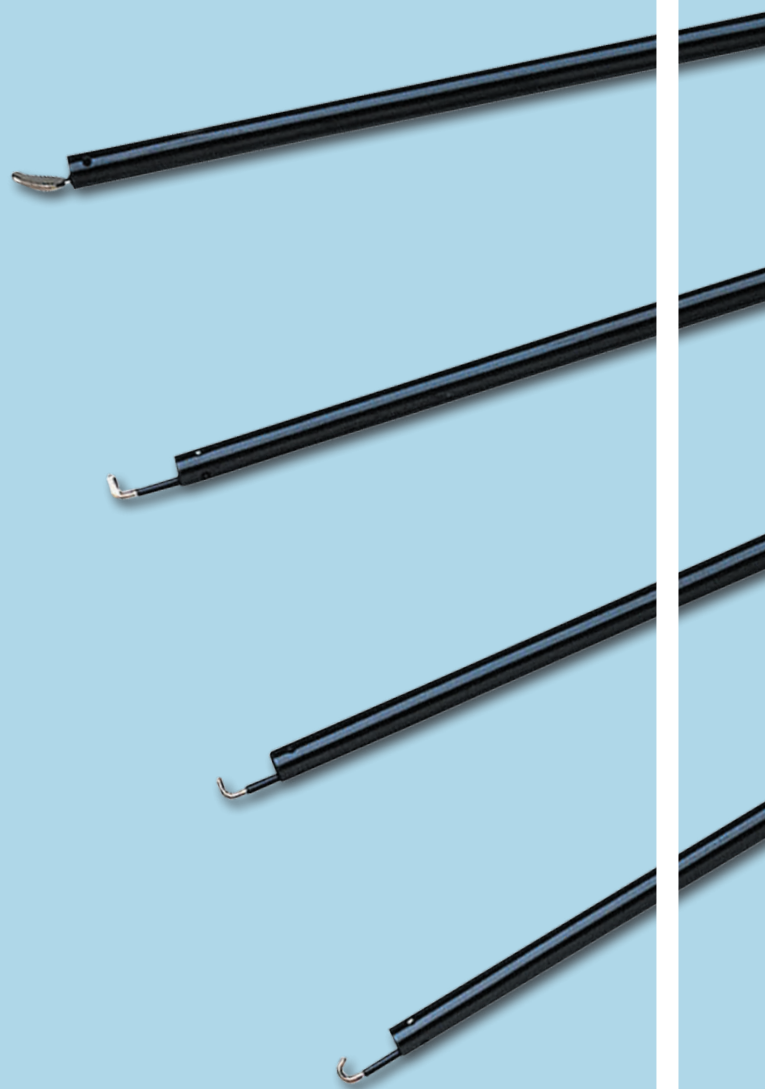


OPTIMUM LAPAROSCOPIC PERFORMANCE

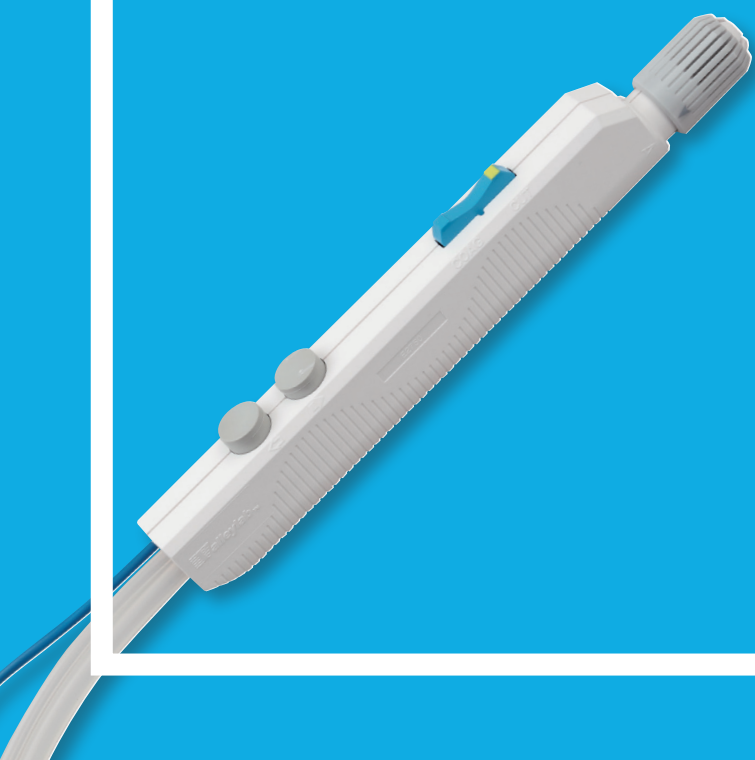

腹腔鏡下手術用Opti4電極・ハンドセット

Medtronic

多機能デバイス

この1本で吸引・洗浄・切開・凝固が行えます。必要とされる器具の本数・入替を減らし、効率的な手術に貢献します。

特徴

電極は部分的に絶縁加工がされているため、予期しない周囲組織の損傷のリスクを低減します。

豊富なオプション

電極は固定型（非引込型）か引込型から選択できます。電極の形状も各種ご用意し、様々な手技・症例に対応が可能です。



E2781RS*



E2782RS*



E2783RS*



E2783RP*



E2784RS*



E278028



E278628

*印がついた電極には、引込型と固定型（非引込型）の2種類があります。

仕様

オプティ4ディスポーザブル腹腔鏡外科手術用ハンドセット

ハンドセットの形状	ペンシルグリップ
吸引・洗浄の操作	ボタン式スイッチ
切開・凝固の操作	ロッカー式スイッチ
吸引管の形状	4.7mmバルブコネクター
洗浄管の形状	雌型ロック式ルーアーコネクター
コード	3m、電気メス装置に直接接続可能な3ピンプラグ付
互換性	全てのコヴィディエンの電気メス装置、及び腹腔鏡下手術用非引込型メス先電極、引込型メス先電極に接続可能

オプティ4ディスポーザブル腹腔鏡外科手術用メス先電極

長さ	28cm及び36cm
外径	4.8mm
絶縁体	ポリオレフィン（腹腔鏡下手術用非引込型メス先電極シリーズ） ポリカーボネート及びPTFE（腹腔鏡下手術用引込型メス先電極シリーズ）
互換性	コヴィディエン製 E2750 ペンシルグリップハンドセット

ORDERING INFORMATION

滅菌済、腹腔鏡下手術用ハンドセット

製品コード	製品名	発注単位
E2750	ペンシルグリップハンドセット	1本

滅菌済、腹腔鏡下手術用非引込型メス先電極

製品コード	製品名	発注単位
E278028	ストレートスパチュラチップ電極 28cm	1本
E278128	カーブスパチュラチップ電極 28cm	1本
E278228	ワイヤーJ字フックチップ電極 28cm	1本
E278328	ワイヤーL字フックチップ電極 28cm	1本
E278628	シリンジ（円筒型）チップ電極 28cm	1本

滅菌済、腹腔鏡下手術用引込型メス先電極、アスピレーションホール付

製品コード	製品名	発注単位
E2781RS	カーブスパチュラチップ電極 28cm	1本
E2782RS	ワイヤーJ字フックチップ電極 28cm	1本
E2783RS	ワイヤーL字フックチップ電極 28cm	1本
E2783RP	ワイヤーL字フックチップ電極 36cm	1本
E2784RS	フラットL字フックチップ電極 28cm	1本

※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
クラス：Ⅱ

ct-he-ea-opt4(01)
1711.pdf.cry