

# ウロキナーゼ固定化抗血栓性カテーテル



positive results for life

## Argyle™

### Blood Access LCV-UK™ Catheter Kit


ブラッドアクセス LCV-UK カテーテルキット シングルルーメン

#### Single-Lumen Catheter (シングルルーメンカテーテル)

- 微小血栓溶解作用のあるウロキナーゼをカテーテルに固定化
- オブチュレーター方式(密栓方式)により、非透析時の血栓形成を予防し、次回透析まで内腔を確保します。
- 医療用ポリウレタン「メディフレックス™」を使用しておりますので、体内留置後は血管走行にあわせて軟らかくなります。

#### ■ 湿潤潤滑コーティング ダイレータ(先端 5cm)

ダイレータ外面を生理食塩液で濡らしていただくことにより、潤滑性を発現する親水性コートを施しています。このコートによりダイレータの挿入がスムーズに行なえます。

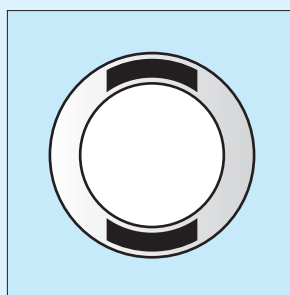

断面図/X線不透過ライン


シングルルーメンカテーテル  
+Yコネクタ

シングルルーメンカテーテル

# Argyle™

ブラッドアクセス LCV-UK カテーテルキット シングルルーメン

## カテーテル

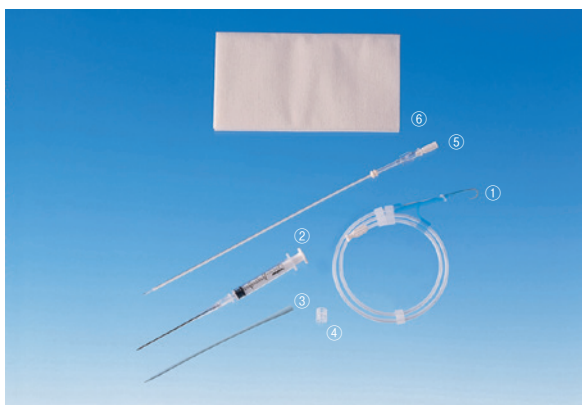

- ①ガイドワイヤ
- ②プラスチックカニューラ針
- ③ダイレータ
- ④ルアープラグ
- ⑤カテーテル
- ⑥穴あきドレープ

カタログ番号	カテーテル 外径(mm)	カテーテル 長さ(cm)	流量 (mL/min※)	プライミング ボリューム(mL)
6008-15SSE	2.7(8F)	14	322	カテのみ 0.06 Yコネを含む 1.46
6008-25E		22		0.92
6008-251E				

包装: 1キット毎滅菌済 ピールバックレイ入り  
包装単位: 2キット/1箱 再使用禁止 X線不透過ライン入り  
備考: 6008-251Eのみオブチュレーター4本入り 6008-15SSEはYコネクター分離型  
※数値は社内における実測値データに基づいたものです。(高さ: 100cm、室温)

## オブチュレーター

カタログ番号	適用カテーテル長さ(cm)
6008-150BE	14cm用
6008-250BE	22cm用

包装: 1本毎滅菌済 ピールバック入り  
包装単位: 10本/1箱 再使用禁止

## Yコネクター



カタログ番号	プライミングボリューム(mL)
6008-YN	0.82

包装: 1本毎滅菌済 ピールバック入り  
包装単位: 10本/1箱 再使用禁止

### < カテーテル >

#### 【製品規格】

一般名称: ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル  
販売名: ブラッドアクセス LCV-UK カテーテルキット  
医療機器承認番号: 21400BZZ00103000  
特定保険医療材料名: 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル シングルルーメン 一般型  
クラス分類: 高度管理医療機器

### < オブチュレーター >

#### 【製品規格】

一般名称: オブチュレーター  
販売名: ブラッドアクセス カテーテル用オブチュレーター  
医療機器承認番号: 21700BZZ00078000  
クラス分類: 管理医療機器



COVIDIEN, COVIDIENロゴマーク及び"positive results for life"はCovidien AGの商標です。  
TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。  
©2016 Covidien.  
ct-dv-icvs  
1602.odp.CLL

問い合わせ先 日本コヴィディエン株式会社  
TEL: (0120)998-971